

CHODÍTKO RF-100

Katalógové číslo:	RF-100
Max. bezpečné zaťaženie:	127 kg
Výška:	78,7 – 86,3 cm
Maximálna šírka:	64 cm
Hmotnosť:	1,94 kg
Hĺbka:	51 cm



Model	RF-100/S	RF-100/BR	RF-100/N
Farba	sivá	hnedá	modrá

POZOR!

Pred použitím chodítka si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

URČENÝ ÚČEL

Chodítko je určené pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí s ochoreniami pohybového aparátu alebo problémami s vertikálnym polohovaním. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri. Pomáha pri každodenných činnostiach, napr. vstávanie z postele, chôdza, používanie toalety, chôdza.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Pre vašu bezpečnosť postupujte podľa týchto odporúčaní:

1. Pred použitím chodítka vždy skontrolujte, či:
 - chodítko je nastavené na správnu výšku;
 - uzamykací mechanizmus a tlačidlá nastavenia výšky sú správne zaistené;
 - všetky nohy chodítka sú nastavené na rovnakú výšku;
 - Spodné kryty na nohách nie sú opotrebované – ak áno, vymeňte ich.
2. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie chodítka.
3. Pri používaní chodítka buďte vždy mimoriadne opatrní. Vyhnite sa akýmkoľvek potenciálnym nebezpečenstvám, ako sú nerovné alebo mäkke povrchy, prekážky v ceste, mokré podlahy atď.
4. Používajte iba originálne príslušenstvo. Použitie neoriginálnych dielov môže mať za následok nesprávne nastavenie chodítka, čo môže mať za následok riziko pádu.
5. Chodítko neskladujte pri teplotách nižších ako 0 °C.
6. Každá závažná nehoda súvisiaca s pomôckou sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko.



POZOR! Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel bezpečného používania môže viesť k vážnym nehodám.



POZOR! Porozprávajte sa so svojim lekárom alebo fyzioterapeutom o výbere správneho chodítka a príslušenstva a o tom, ako ho používať v súlade s vašimi funkčnými schopnosťami a každodennými aktivitami.



POZOR! Nasledujúce odporúčanie je odporúčaním výrobcu, ale mali by ste sa poradiť so svojim lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.



POZOR! Ak je chodítko správne nastavené, užívateľ by mal byť schopný udržiavať vzpriamené držanie tela s mierne ohnutými laktóvymi kĺbmi. Pri chôdzi preberá rám chodítka váhu tela.





SKLADANIE A ROZKLADANIE CHODÍTKA

Rozkladanie:

1. Odstráňte bezpečnostnú sponu (obr. 4).
2. Jednou rukou uchopte horný rám chodítka a druhou rukou prednú pohyblivú časť a roztiahnite ich od seba.
3. Uistite sa, že je chodítko úplne vysunutú.
4. Nainštalujte bezpečnostnú sponu.

Skladanie:

1. Odstráňte uzamykáciu sponu.
2. Jednou rukou uchopíte horný rám chodítka a druhou rukou potiahnete okrúhlu rukoväť (obr. 2).
3. Keď je chodítko zložené (obr. 3), pripevnite bezpečnostnú sponu.

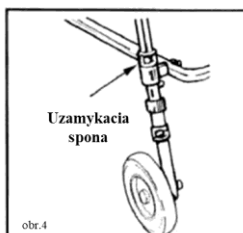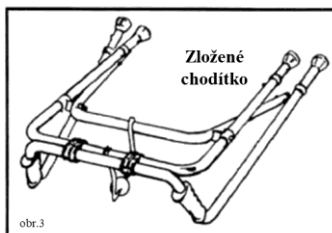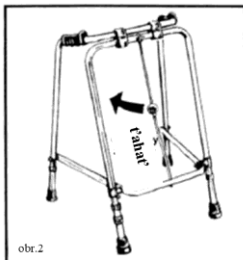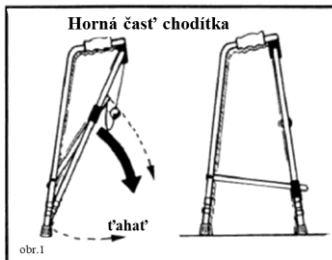

 **POZOR!** Z bezpečnostných dôvodov, aby sa zabránilo zloženiu chodítka počas používania, musí byť na svojom mieste bezpečnostná svorka.

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE CHODÍTKA

Uistite sa, že je chodítko nastavené v primeranej výške pre užívateľa.

Chodítko je možné nastaviť pomocou uzamykacej svorky alebo zaistovacieho tlačidla.

Uzamykacia spona:

1. Odstráňte sponu tak, že ju pridržíte medzi palcom a ukazovákom a potom ju vytiahnete smerom von.
2. Pohybujte nohou nahor alebo nadol, aby ste dosiahli požadovanú výšku.
3. Zatlačte sponu späť do príslušného otvoru.
4. Uistite sa, že spona správne zaistila prítlačnú pátku na mieste.

Tlačidlo uzamknutia:

1. Stlačte tlačidlo na oboch stranách rámu.
2. Mierne otočte nohu, aby ste zabránili zacvaknutiu tlačidla späť na miesto.
3. Posuňte nohu do požadovanej výšky, mierne ju otočte a uvoľnite tlačidlo, kým nezapadne do otvorov.
4. Uistite sa, že tlačidlo správne zaistilo prítlačnú pátku na mieste.



ČASTI CHODÍTKA



ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Odporúča sa pravidelne kontrolovať chodítko, či nevykazuje známky poškodenia alebo viditeľné známky opotrebovania. Pravidelne kontrolujte, či:
- na ráme sa neobjavili žiadne praskliny alebo praskliny;
 - uzamykacie tlačidlo správne uzamkne nastavenú výšku;
 - otvory v potrubiach nie sú zväčšené ani predĺžené,
 - spodné kryty nie sú opotrebované – ak áno, mali by sa vymeniť;
 - Žiadne iné časti chodítka nie sú uvoľnené alebo poškodené.
2. Odporúča sa pravidelne čistiť chodítko mäkkou handričkou a mydlovou vodou. Po vyčistení by mal byť balkón vysušený mäkkou handričkou.



POZOR! Na čistenie valčeka nepoužívajte rozpúšťadlá, bieliadlá ani abrazívne prostriedky.



POZOR! Ak máte pochybnosti o vhodnosti pomôcky na použitie, obráťte sa na servisné stredisko výrobcu.

ZOZNAM POUŽITÝCH MATERIÁLOV

Rám	Hliník
Rukoväť	PP (polypropylén)
Kolesá	EVA (etylénvinylacetát) + PP (polypropylén)
Krytky	guma
Uzamykacie tlačidlo	oceľ
Guľový držiak	drevo

VYSVETLENIE SYMBOLOV

	Výrobca
	Označenie CE
	Referenčné číslo
	Dátum výroby
	Pozrite si návod na použitie
	Varovanie
	Sériové číslo
	Hore, neprevracajte
	Skladujte v suchu
	Krehké, zaobchádzajte opatrne

**REHA FUND Sp. z o.o.**

Ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko
tel.: +48 22 594 03 00, fax: +48 22 594 03 07
E-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3

Publikované: 11/2021

ZÁRUČNÝ LIST**WALKER RF-100**

Model:	Sériové číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predávajúceho:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Výrobca ubezpečuje zákazníka, že odovzdaný predmet, na ktorý je vystavený tento záručný list, je úplne nový a kvalitný.
- Na choditko sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja v záručnom liste.
- Základom pre posúdenie reklamácie je doručenie správne vyplneného záručného listu s priloženým dokladom o kúpe.
- Prípadné závady na zariadení odstráni spoločnosť REHA FUND Sp. z o.o. alebo autorizovaní servisní technici za predpokladu, že zariadenie bolo používané v súlade s jeho určením a odporúčaniami v návode na použitie.
- Oprava sa vykoná čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dátumu prijatia zariadenia v servisnom stredisku.
- Záruka sa nevzťahuje na
 - údržba, čistenie a nastavovanie popísané v návode na použitie;
 - časti podliehajúce opotrebovaniu pri bežnom používaní;
 - mechanické a tepelné poškodenie, napr. ohyb, poškrabanie, zlomenie atď.;
 - poškodenie spôsobené používaním zariadenia v rozpore s návodom na použitie, nedbanlivosťou, vykonaním nezávislých opráv, úprav alebo zmien dizajnu.
- Pred vrátením zariadenia do autorizovaného servisného strediska je potrebné zariadenie vyčistiť v súlade s pokynmi používať tak, aby bol vhodný na servis.
- Opravy a výmenu náhradných dielov by mali vykonávať autorizovaní servisní technici Reha Fund Sp. z o.o.
- V prípade neopodstatnenej reklamácie budú zákazníkovi účtované náklady na dopravu.
- Územná pôsobnosť záručnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
- Záruka na dodaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

ZOZNAM SERVISNÝCH OPRÁV (*vyplňa servis*)

Č.	Dátum podania žiadosti	Obj. č.	Popis chyby/rozsah opravy	Dátum vykonania opravy	Pečiatka a podpis servisu
1.					
2.					